

爱戴 使用说明书

一、软件简介

软件名称：爱戴，版本号：V1.9.4

软件介绍：爱戴app是与本公司智能穿戴设备所配合使用的app，通过爱戴app绑定智能穿戴设备，您可以：监控实时定位穿戴设备，并查看定位的活动轨迹；设置每台设备的设备信息；接收设备的报警推送等；若采购的设备支持健康监测，您还可以在app查看每天的健康信息，如：计步，睡眠，心率，体温，血压等，此外，还可对每个设备进行电子围栏的设置，适用于安全区域，活动区域，或是危险区域等场景。

软件下载：安卓系统应用商店可搜索爱戴进行下载，苹果系统应用商店搜索爱戴进行下载；二维码扫描下载（二维码如下：）



二、运行环境

Android系统

目录

爱戴 使用说明书	1
一、软件简介	1
二、运行环境	1
三、软件使用说明	3
3.1 登录注册页面.....	3
3.2、主界面-定位界面（界面效果参考）	4
3.2.1、定位界面-NB.....	4
3.2.2、定位界面-4g	9
3.3 主界面-健康（界面效果参考）	15
3.4 主界面-我的（界面效果参考）	18


三、软件使用说明

3.1 登录注册页面

登录：若有已注册的账号，可输入账号名称和登录密码，点击登录页面进行账号登录

注册：若没有注册过账号，可点击界面下方的注册按钮进行注册

忘记密码：若有已注册的账号但是忘记了相应的密码，可点击忘记密码进行密码的重置（注意：需要注册的账号绑定了邮箱，绑定邮箱界面见后）

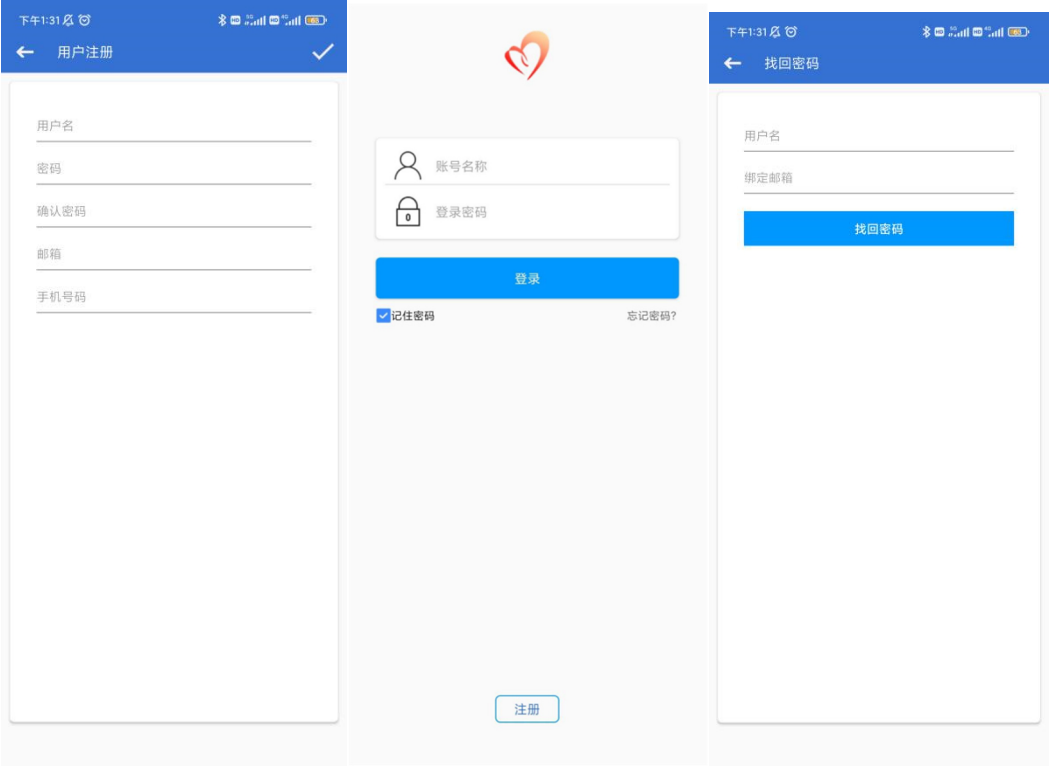

注册界面

登录界面

忘记密码界面

3.2、主界面-定位界面（界面效果参考）

3.2.1、定位界面-NB


主界面-设备界面包括：地图，设备信息，设备轨迹，设备围栏，设备消息，设备设置，设备列表
地图：显示设备的定位的位置及相应的设备名称



设备信息：设备名称，设备 IMEI,信号情况，定位地址，最后定位时间，最后通信时间




设备轨迹：可查看不同时间段的定位轨迹

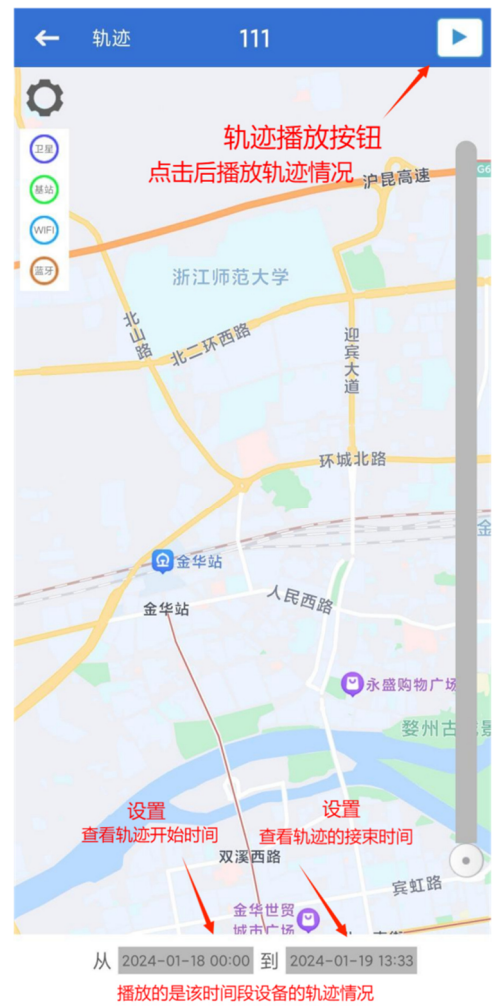


设备围栏：设置只有该设备会触发的电子围栏，电子围栏类型：进（处于围栏内会报警）；出（处于围栏外会报警）；进出（设备有进出围栏的行为发生）



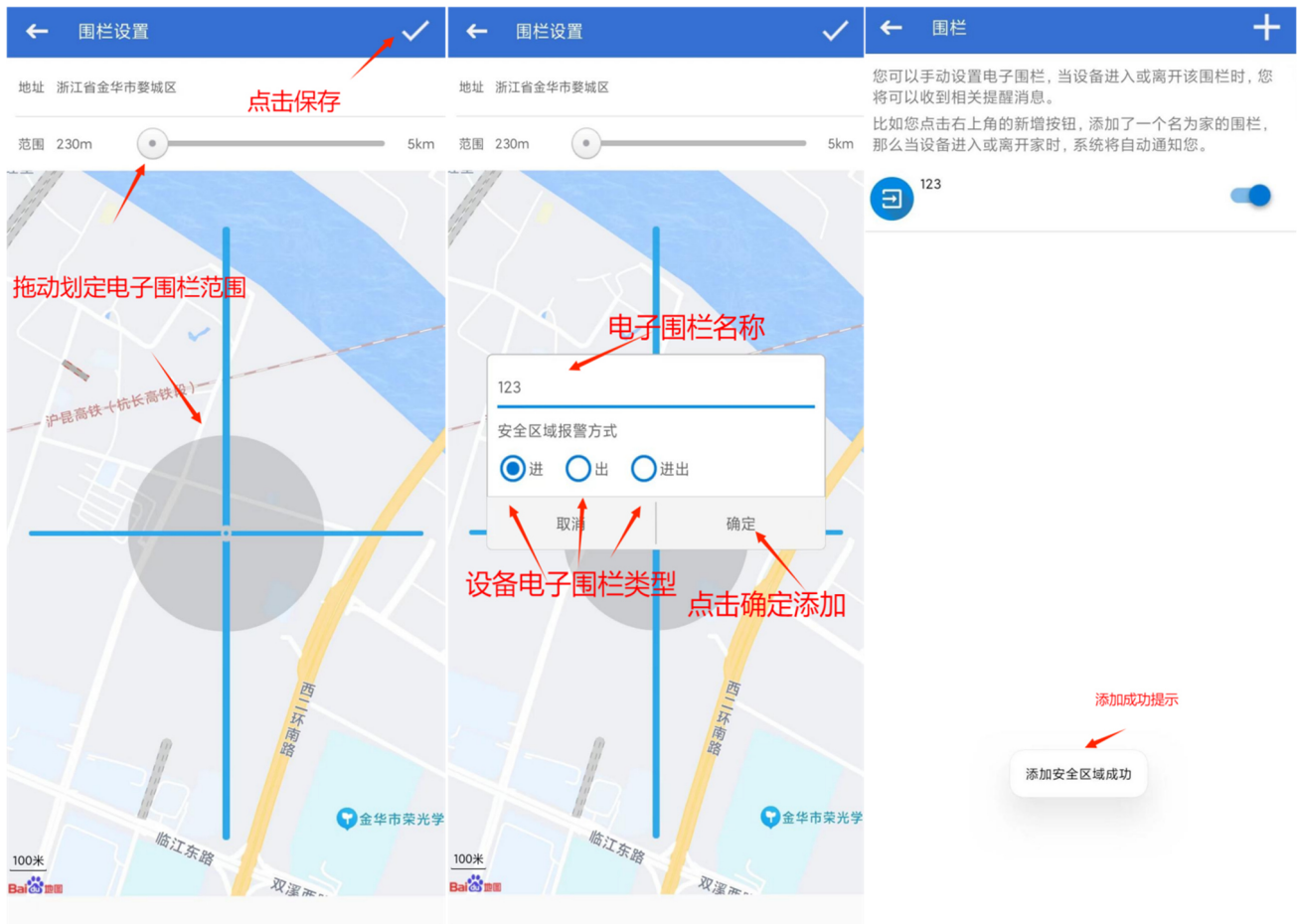

设备消息：设备消息显示的是设备的报警消息：如：触发的电子围栏报警，SOS 报警等（根据不同设备型号支持的报警不同）；图片以设置了账号围栏（Web 平台设置，详细参考智慧云平台使用说明）的 Z66（1 分钟上报）设备为例

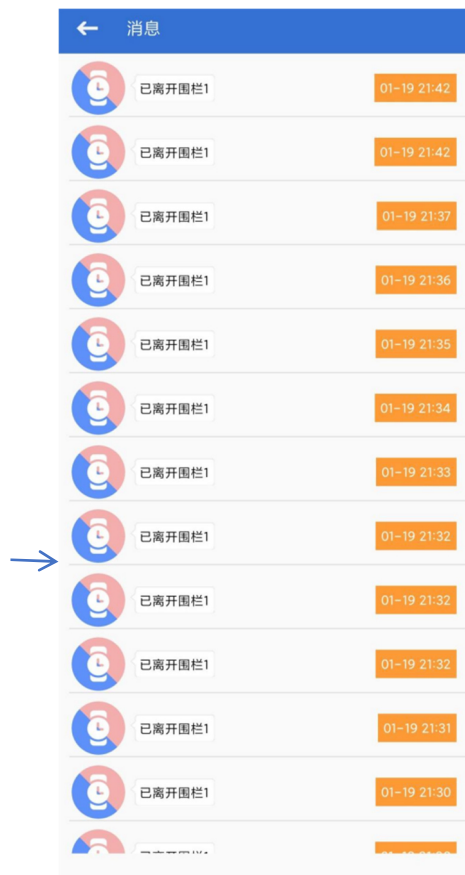

设备设置：定位频率设置（设置设备的上报数据频率），定位优先级设置（设置不同类型的定位优先级），文字消息下发（部分型号设备无此功能，界面效果参考 4g 设备文字消息下发），二维码（设备绑定二维码），关注者列表（显示绑定的账号数以及主控号），解除绑定（解除当前设备与登录账号的绑定）





设备列表：查看当前账号绑定的设备在线情况（在线：数据正常上报，离线：设备关机或设备休眠数据不上报）



3.2.2、定位界面-4g

主界面-设备界面包括：地图，设备信息，设备轨迹，设备围栏，设备消息，设备设置，设备列表

地图：显示设备的定位的位置及相应的设备名称



设备信息：设备名称，设备 IMEI,信号情况，定位地址，最后定位时间，最后通信时间



← 设备信息

111

性别

男

0

CM

生日

1980-01-01

0.0

KG

设备SIM卡号码

住址:

备注:


效果参考

设备轨迹：可查看不同时间段的定位轨迹




设备围栏：设置只有该设备会触发的电子围栏，电子围栏类型：进（处于围栏内会报警）；出（处于围栏外会报警）；进出（设备有进出围栏的行为发生）




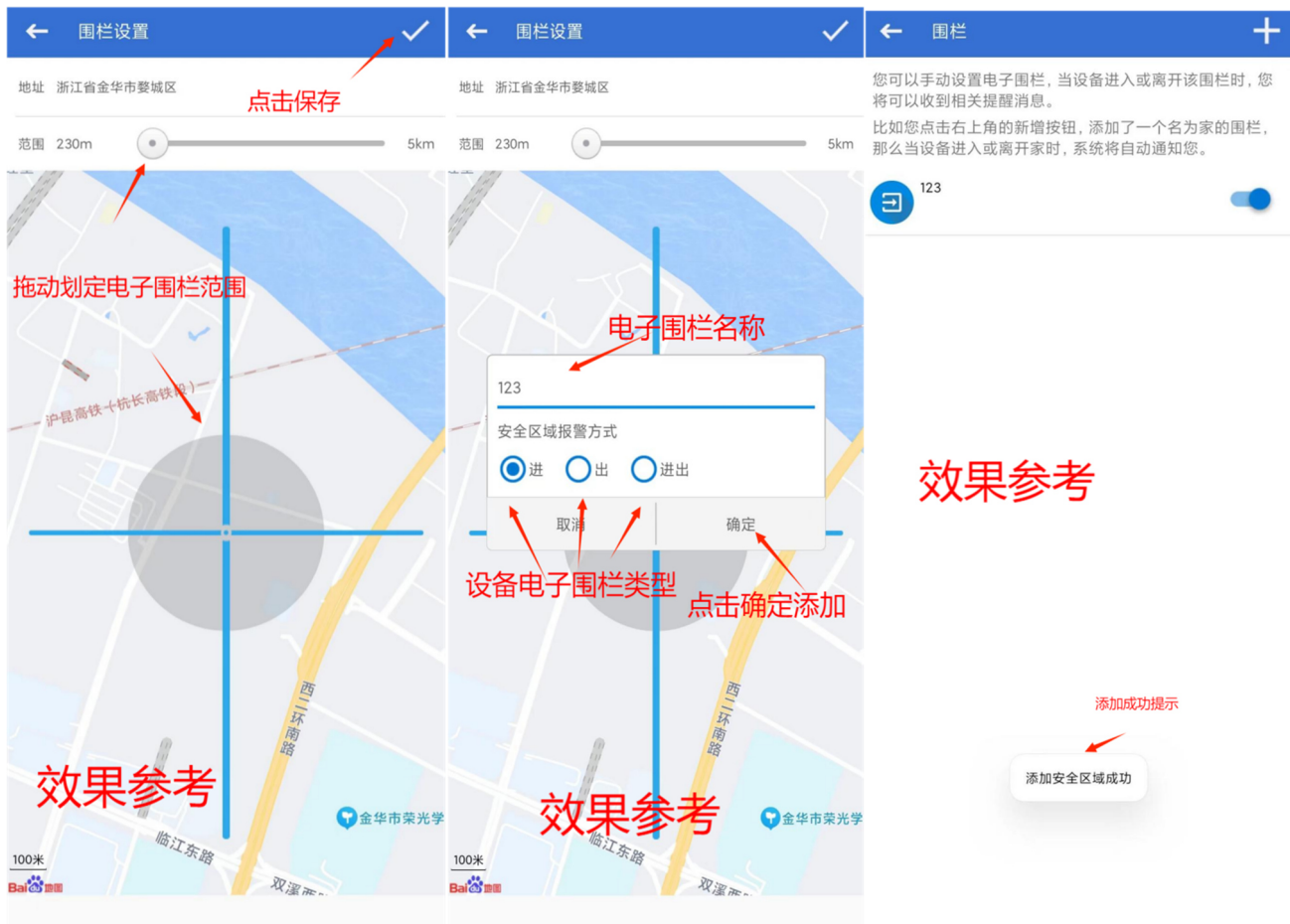

设备消息：设备消息显示的是设备的报警消息：如：触发的电子围栏报警，SOS 报警等（根据不同设备型号支持的报警不同）；图片以设置了账号围栏（Web 平台设置，详细参考智慧云平台使用说明）的 Z66（1 分钟上报）设备为例

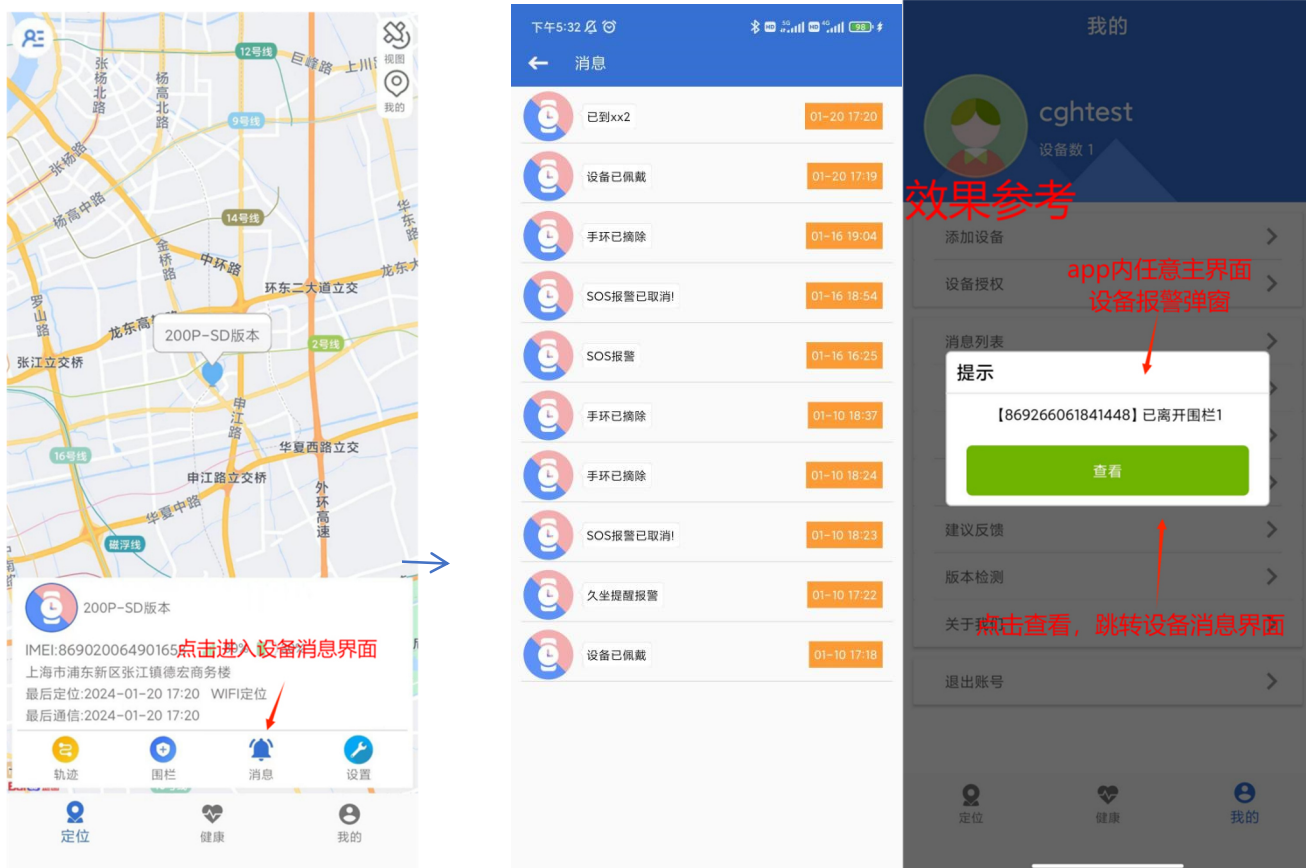

设备设置：4g 定时定位（设置设备的上报数据频率），4g 功能模式配置（设置不同类型的定位优先级），4G 文字消息下发（部分型号设备无此功能），二维码（设备绑定二维码），关注者列表（显示绑定的账号数以及主控号），解除绑定（解除当前设备与登录账号的绑定）

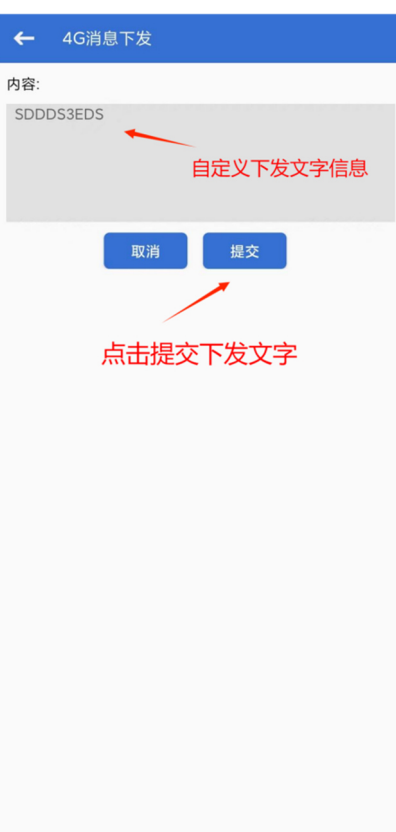




效果参考

设备列表：查看当前账号绑定的设备在线情况（在线：数据正常上报，离线：设备关机或设备休眠数据不上报）



3.3 主界面-健康（界面效果参考）

心率：

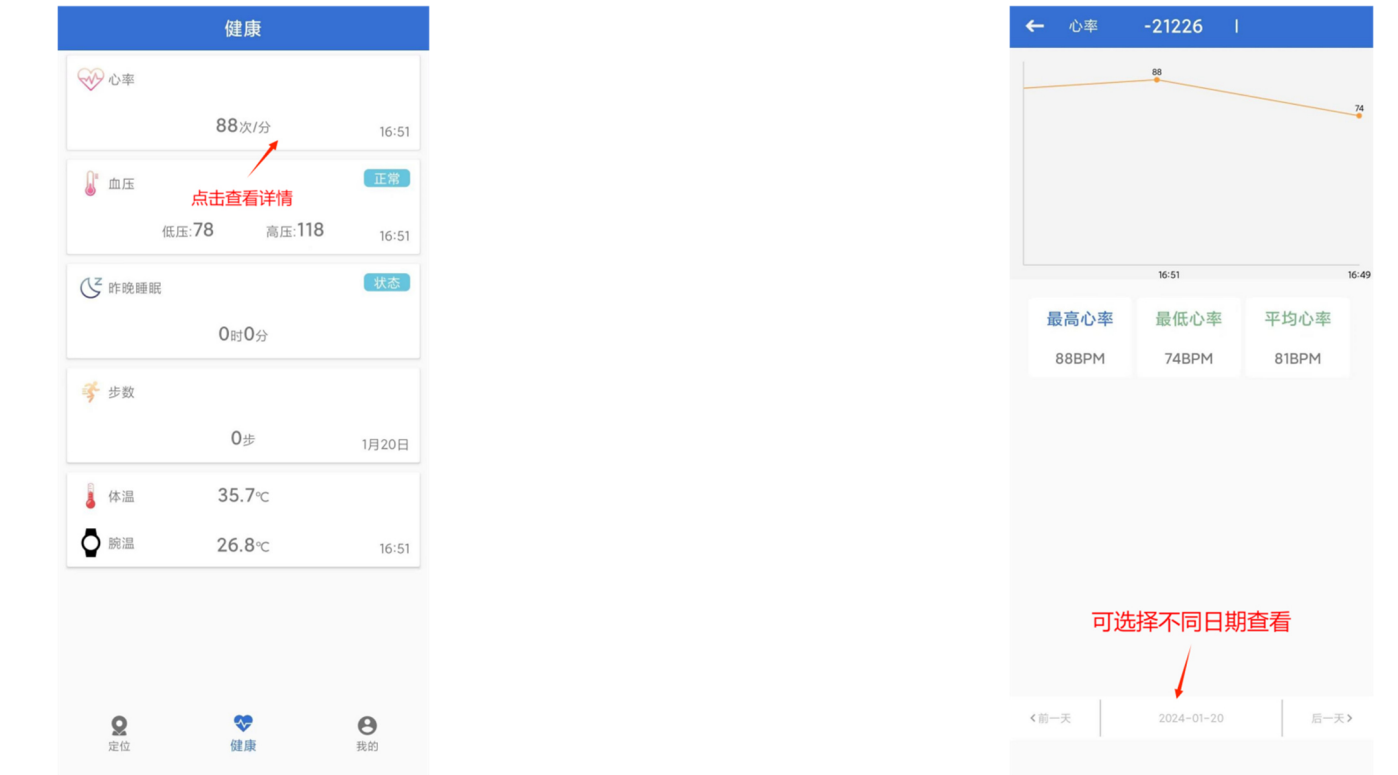

血压：



睡眠：



步数:



体温腕温：

健康

心率

80次/分

17:05

血压

正常

低压:77 高压:117

17:05

昨晚睡眠

状态

0时0分

步数

0步

1月20日

体温

36.2℃

腕温

30.7℃

17:05

定位

健康

我的

点击查看详情



血氧（部分型号设备有）：

健康

心率

0次/分

00:00

血压

正常

低压:0 高压:0

00:00

昨晚睡眠

状态

0时0分

步数

0步

1月20日

体温

0℃

腕温

0℃

00:00

血氧

0SaO2

00:00

定位

健康

我的

← 血氧 00P-4G-#

最高血氧

0SaO2

最低血氧

0SaO2

平均心率

0SaO2

< 前一天


2024-01-20

后一天 >

3.4 主界面-我的（界面效果参考）

主界面-我的：账号信息，添加设备，设备授权，消息列表，通知设置，手机适配，注销账号，建议反馈，版本检测，关于我们，退出账号

账号信息：头像（点击自定义），昵称（自定义），修改密码，绑定邮箱（**忘记密码操作必须要绑定邮箱**），电话号码

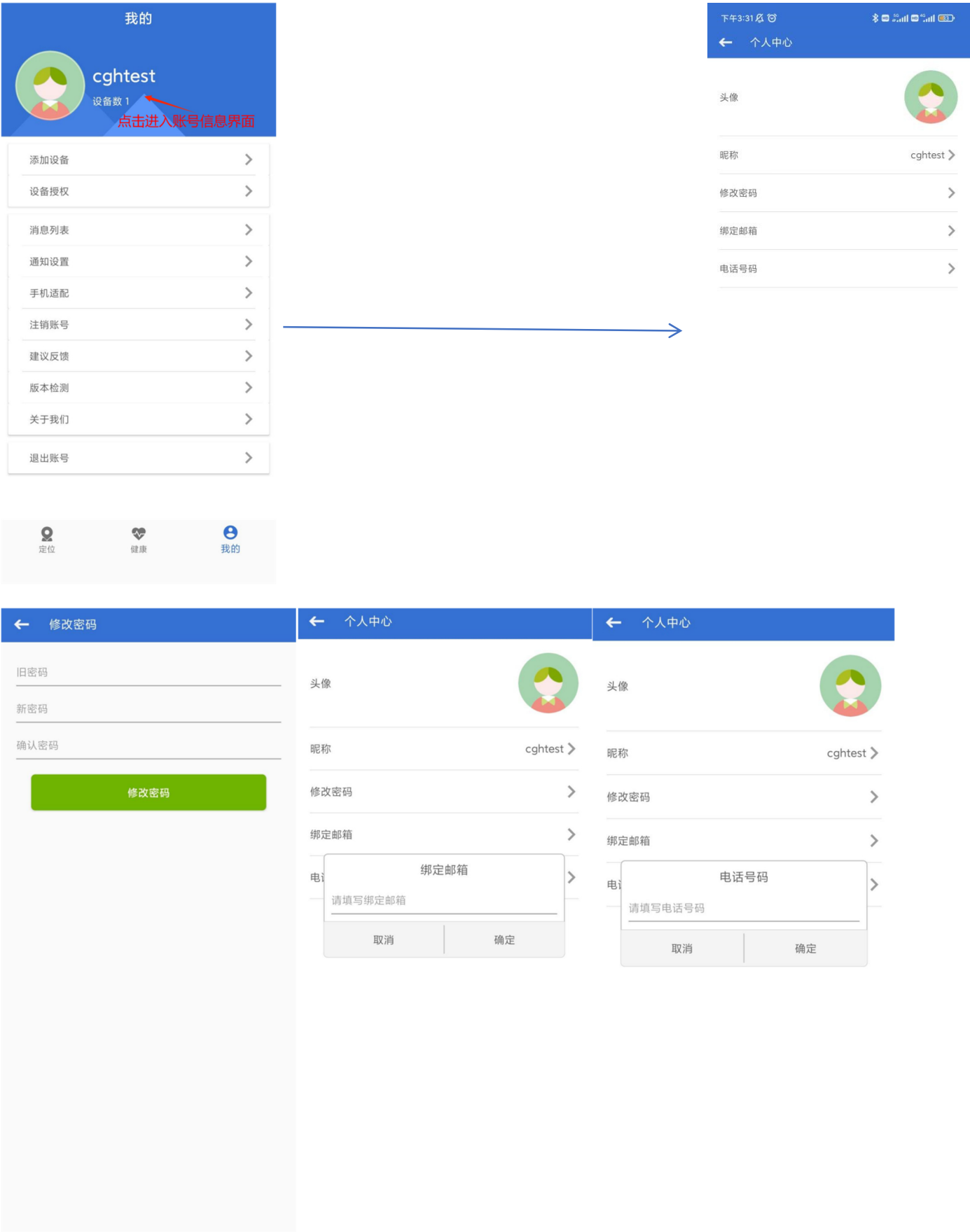

添加设备:进行设备与账户的绑定，支持扫码和手动输入




设备授权：若非主控号的账号对设备进行添加设备操作时，需主控号进行授权，主控号在此界面同意或拒绝绑定



消息列表：显示不同设备的报警通知消息



通知设置：打开和关闭爱戴通知（配合查看手机适配，不同手机设置权限不同），以及设置免打扰时间段

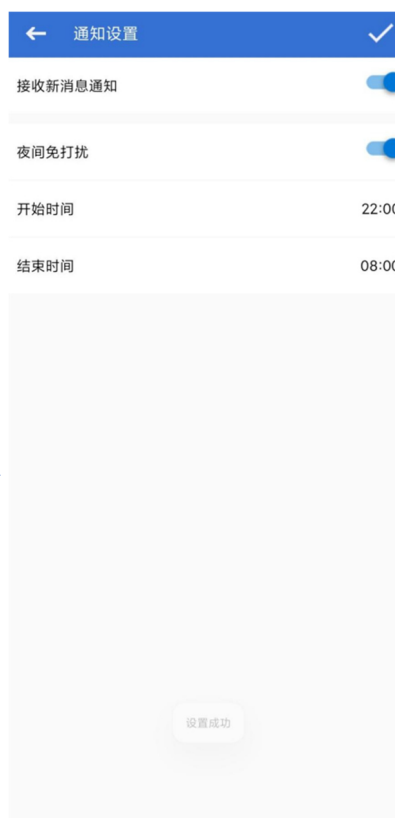


手机适配：查看不同手机适配的说明



注销账号：注销当前登录账号



建议反馈：可以提交问题反馈

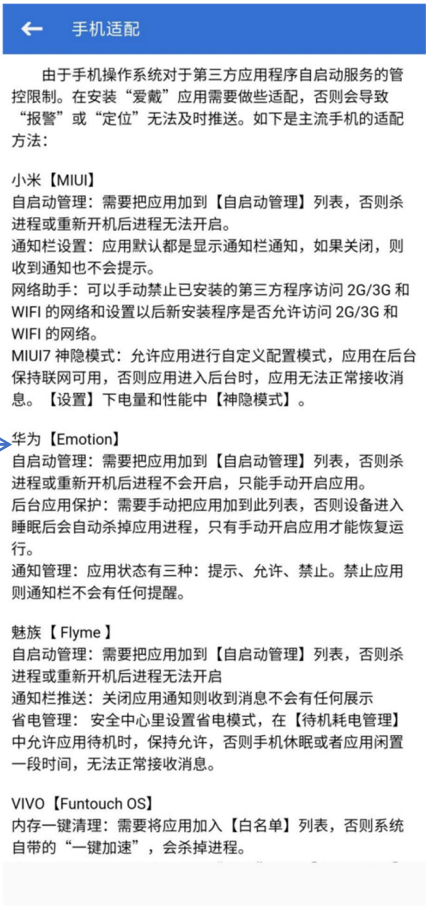

点击注销账号



版本检测：检测当前 APP 软件版本



关于我们：app 相关信息





退出账号：点击退出当前登录账号

